
#### PANTALLA OPTOTIPOS LCD-2600



## Pantalla 21" LCD

Simplifique el proceso de examen y disfrute de una alta calidad con una claridad excepcional.

## Tipo de gráfico C

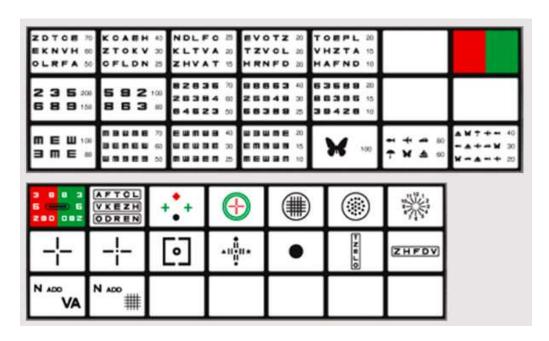

#### Enmascaramiento

El LDC-2600 proporciona enmascaramiento de líneas verticales y horizontales, así como enmascaramiento de una sola letra, para que pueda mostrar a los pacientes exactamente en qué línea o letra desea que se concentren.








Distancia de trabajo variable con calibración automática de Optotipos.

El tamaño del optotipo se calibra automáticamente a la distancia de trabajo, eliminando la necesidad de sistemas de espejo que comprometen la calidad de la imagen, así como la necesidad de una instalación profesional. La distancia de trabajo puede estar entre 2m a 6,5m. El gráfico de tipo B es de 0,5m por paso y el gráfico de tipo A es de 0,25m por paso. La mejor distancia de trabajo debe ser de 2,5m ~ 6m.

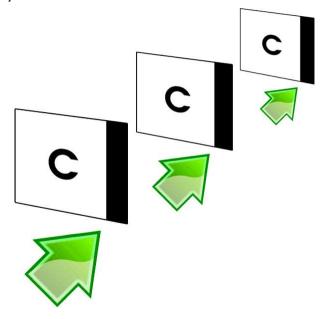


Carga de imágenes rápida y silenciosa Como el software LDC-2600 se basa en una tarjeta SD, la carga de imágenes es extremadamente rápida. Sistema de software independiente Dado que el software de gráficos está ubicado en una tarjeta SD, actualizar su LDC-2600 es simple. Cuando desee actualizar, simplemente reemplace la tarjeta SD. No lo cambie usted mismo.



Diagrama del ojo


El LDC-2600 simplifica la educación del paciente con un diagrama de ojos integrado. Esta herramienta es ideal para tener a mano siempre que sea necesario explicar demostrar algo a un paciente.

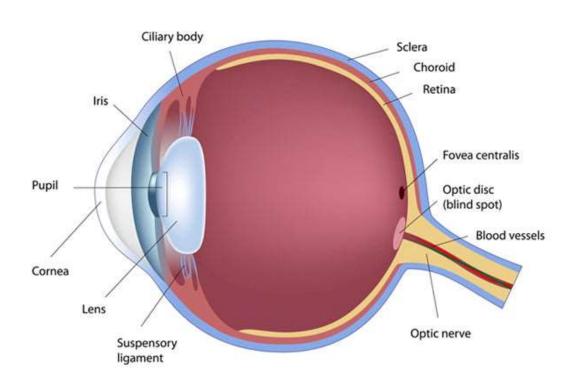

Sistema integral de agudeza visual:

La agudeza visual puede ser medida utilizando números, letras de Snellen, figuras infantiles. Posee función de enmascaramiento por línea, columna o carácter único.

Además, ofrece test de forias, test rojo-verde, test de equilibrio binocular, test de 4 puntos de Worth, test de Schober, test de Ishihara, pruebas de astigmático entre otras.

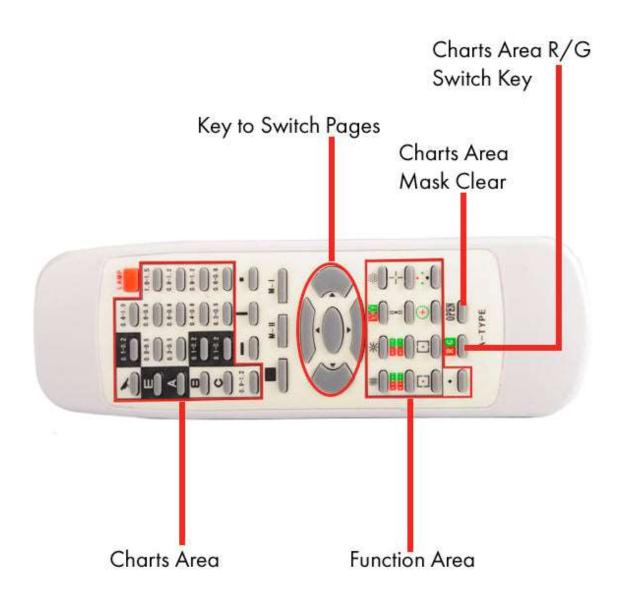

### Ahorro de energía La pantalla LDC-2600 se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad.



Varias opciones de instalación El LDC-2600 puede montarse en la pared (soporte de montaje incluido) o puede ser colocado sobre una mesa o soporte.



# Especificaciones Técnicas

Pantalla LCD	21.5"
Tamaño de píxel	0.0097in (0.24825mm)
Brillo máximo	250cd/m2
Relación de contraste máxima	1000:1
Resolución máxima	1920x1080
Señal de entrada	RGB
Junta de señal	Enchufe de patrón de 15 pines D
Consumo de energía	17W
Peso neto	8.624lb (3.92Kg)
CompatibilidadPC/MAC	
Dimensiones	5.9(D) x 21.26(W) x 14(H)in (150(D) x 540(W) x 358(H)mm)